



Telemis s.a.
Avenue Athena, 2
B-1348 Louvain-la-Neuve

STEIDZAMS - DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS MEDICĪNAS DARBINIEKIEM

Telemis-Medical programmatūra Atsauce FSN 26515

Datums: 2021. gada 12. maijs

Šī dokumenta adresāti

Šis dokuments ir paredzēts visiem Telemis-Medical programmatūras lietotājiem un it īpaši — radioloģijas nodaļas vadītājam, PACS vadītājam un IT vadītājam.

Tēma

Telemis nesen konstatēja problēmu, kas saistīta ar pacienta atlasīšanu darbu saraksta logos (lietojumprogrammā Viewer, Acquisition Controller,...): filtrējot sarakstu, faktiski ir iespējams atlasīt citu pacientu.

Tādējādi šī problēma var ietekmēt pacienta drošumu. Lūdzu, pārliecinieties, ka visi iespējamie iekārtas lietotāji Jūsu iestādē izlasa šo drošības paziņojumu un drošības ieteikumus.

Līdz šim nav novērots neviens incidents, kurā ticis ietekmēts patients.

Ietekmētās sistēmas

Potenciāli ietekmētas ir visas iestādes, kurās tiek izmantota versija 4.95.

Problēmas apraksts, situācijas, kurās problēma var rasties, un iespējamās sekas

Kad darbu sarakstu logos atlasa pacientu (TMRHE, TMAAC, ...), izmantojot saraksta filtru, faktiski ir iespējams atlasīt citu pacientu. Dažos gadījumos lietotājs šo problēmu var konstatēt, bet ne visos:

Query workload :

Patient name:

Patient ID:

Birth date:

Study date:

Study ID:

Study description: SCANNER THORACIQUE 10 MIN

Modality: CT

Patient name	Patient ID	Birth date	Patient Birth Place	Study date	Study ID	Modality
Patient 1	PID 1	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 1	CR
Patient 2	PID 2	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 2	COLOR
Patient 3	PID 3	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 3	MG
Patient 4	PID 4	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 4	CR
Patient 5	PID 5	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 5	XA
Patient 6	PID 6	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 6	MR
Patient 7	PID 7	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 7	CT
Patient 8	PID 8	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 8	CR
Patient 9	PID 9	1990-01-01		2020-01-01	STUDY 9	CR

Quick search :

Filter : Patient name

☐ More modalities

Piezīme. Ātrā meklēšana netiek ietekmēta:

Query worklist: 10-01-2017 10:00:00

Patient name: 10-01-2017 10:00:00

Patient ID: 10-01-2017 10:00:00

Birth date: 10-01-2017 10:00:00

Study date: 10-01-2017 10:00:00

Study ID: 10-01-2017 10:00:00

Study description: **SCANNER THORACIQUE 10 MIN**

Modality: **CT**

Patient name	Patient ID	Birth date	Patient Birth Place	Study date	Study ID	Modality
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	CR
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	COLOR
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	MG
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	CR
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	XA
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	MR
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	CT
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	CR
10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00		10-01-2017 10:00:00	10-01-2017 10:00:00	CR

Quick search: Filter: Patient name

☐ More modalities

Darbu saraksta logs tiek izmantots dažādās vietās, piemēram:

- TMAAC
- TM-Welcome

- TMRHE: TM-Community
- TMRHE: DICOM/multivides importēšana
- TMRHE: DICOM eksportēšana

Medicīniskais risks


Darbu sarakstā esošā informācija, kas tiks izmantota, atšķiras no atlasītās.

Darbu sarakstā tiks saistīts nepareizs ieraksts (proti, nepareizu pacientu), un tāpēc var tikt ietekmēta pacienta veselība.

Drošības ieteikumi

Labojums būs pieejams kā daļa no 4.95 ielāpa, ko paredzēts izlaist 2021. gada maija beigās vai jūnijā.

Tikmēr filtrēšanas opciju ar darbu saraksta loga filtru nedrīkst izmantot. Kā risinājumu tā vietā var izmantot ātrās meklēšanas funkciju:

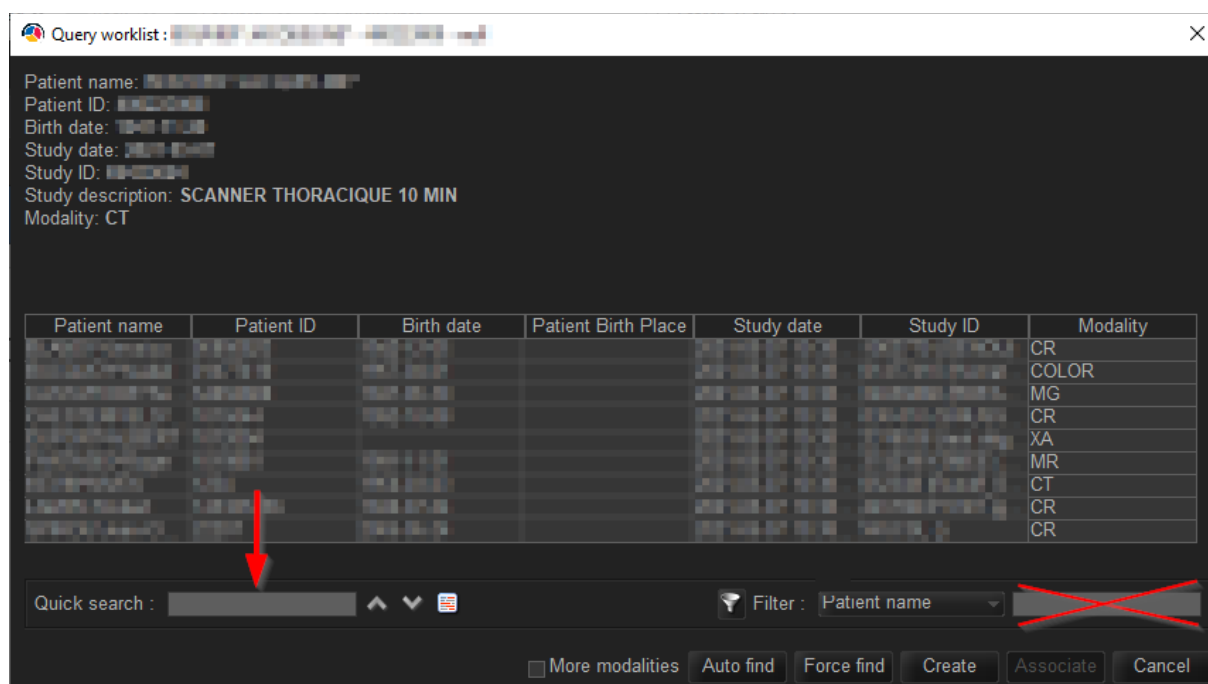

Korektīvā darbība

Tiklīdz būs pieejams jauns programmatūras laidienis, Jūsu *Telemis-Medical* instalācija tiks atjaunināta bez maksas un Jūs informēs par attiecīgo labojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Telemis izstrādes inženieri dara visu iespējamo, lai iespējami drīz atrisinātu šo problēmu. Tā ir mūsu galvenā prioritāte.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu produktu atbalstu nodaļu:

- Beļģija: +32 10 48 00 18
- Francija: +33 534 273 840
- Šveice (franču valoda): +41 215 88 06 01
- Šveice (itāliešu valoda): +41 215 30 94 94
- Itālija: +39 011 739 00 91
- Latvija: +371 66 16 30 85

Uzņēmums Telemis apstiprina, ka valsts pilnvarotās iestādes ir informētas par šo drošības paziņojumu.

Ar cieņu,

Jean-Claude Spelte
Kvalitātes vadītājs
jcs@telemis.com

Damien Martinquet
Atbalsta dienesta vadītājs
dm@telemis.com